



Pentru o aplicare ușoară



Luna-Wing **Flow**

Rășină compozită indirectă fotopolimerizabilă

Ușor de lucrat

Luna-Wing Flow este proiectat și potrivit pentru aplicare directă

Proprietăți fizice

Chiar dacă este tipul fluid, prezintă aceeași rezistență la îndoire ca Luna-Wing tipul pastă

Estetică deosebită

Luna-Wing Flow face posibilă exprimarea tonurilor delicate de culoare, pentru a putea reproduce aspectul natural al dintelui

Gama de culori Luna-Wing Flow Shade (16 culori)


Nuanță de bază



Trans




Efect

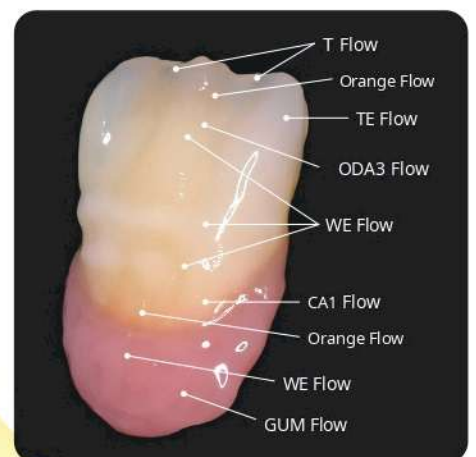

Exemplu de aplicare pentru caracterizarea internă
Pentru stratificarea de bază este indicat să se utilizeze tipul pastă de Cervical și Dentină

Exemplu de aplicație Luna-Wing Flow

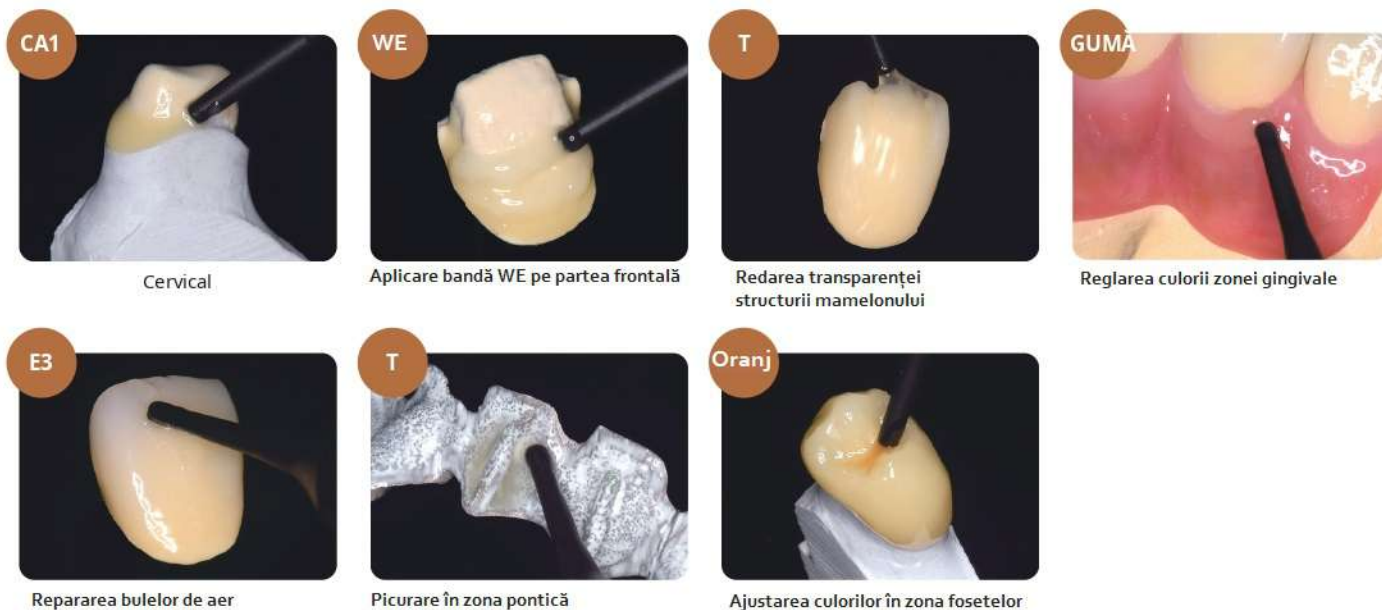

Ușurință în lucru

- Deoarece duza este proiectată cu o deschidere de 0,7 mm, este potrivită pentru aplicare directă.
- Luna-Wing Flow are o fluiditate optimă, este potrivit pentru utilizarea în zona pontică, pentru reparații și caracterizare.
- Aplicarea directă reduce riscul de captare a bulelor de aer.

Proprietăți fizice

- Chiar dacă este tipul fluid, prezintă o rezistență la îndoire de aprox. 110 MPa, o valoare apropiată de tipul pastă Luna-Wing

	Metoda de testare: ISO 10477: 2018	Tip curgător	Tipul de lipire
Rezistența la încovoiere (MPa)	Nu mai mic de 50 (Nu mai puțin de 80 pentru suprafața ocluzală)	110	114
Duritate Vickers (HV0.2)	Nu mai mic de 18	40	59
Rata de contracție prin polimerizare (vol%)	–	3.4	1.8

(Valoare de referință)

Luna-Wing Flow este destinat utilizării parțiale, cum ar fi repararea bulelor sau caracterizarea, deoarece are o rată de contracție de polimerizare mai mare decât tip pastă. Este foarte recomandat să folosiți tipul de pastă pentru aplicarea de bază, cum ar fi stratificarea dentinei și a smalțului.



Luna-Wing Flow



produse asemanatoare

Material de lipire pentru metal dentar (ceramica dentara, rasina dentara)



Multi Primer

Pentru repararea intraorală a restaurărilor (metal, ceramică și rășină)

Pachet unic Multi Primer LICHID (7mL)
Multi Primer PASTA (2mL)
Multi Primer REPAIR LIQUID ONE (6mL)

Aparat de fotopolimerizare



LED CURE Master

Unitate de fotopolimerizare pentru rășină compozită indirectă

Producător

YAMAKIN CO., LTD.
1090-3 Otani, Kamibun, Kagami-cho,
Konan-shi, Kochi, 781-5451 Japonia
<https://www.yamakin-global.com>

Sediul central: 3-7 Sanadayama-cho Tennoji-ku Osaka 543-0015, Japonia Sucursala:
Tokyo, Osaka, Sendai, Nagoya, Fukuoka, JAPONIA Fabrică și cercetare și dezvoltare: Kochi, JAPONIA
P: +81-887-55-0281 F: +81-887-55-0053 E:
contact@yamakin-gold.co.jp

CE 0123

INTERNATIONAL20190913