



# Luna-Wing HS

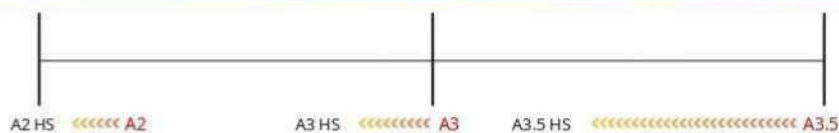

Luna-Wing HS Harmony Shade (nuanță armonizată) - a fost atenuat tonul roșietic specific dinților populației din zona Asiei, pentru a se potrivi cu cheia de culori Vita

Ușor de folosit, chiar și de tehnicienii dentari care utilizează pentru prima dată compozitul Luna-Wing.

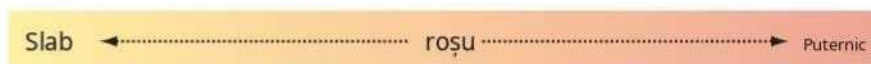

Nuanță	A2 HS	A3 HS	A3.5 HS
Opac invizibil	IVO existent		
Nuanța Opacă	Opac existent		
Dentina opacă (3 culori)			
	ODA2 HS	ODA3 HS	ODA3.5 HS
Dentină (3 culori)			
	DA2 HS	DA3 HS	DA3.5 HS
Smalt (2 culori)			
	E2 HS	E3 HS	

Tipul dur este disponibil și pentru gama Enamel.



# Luna-Wing


Rășină compozită hibridă pentru C&B

- ✓ Usor de mânuit!
- ✓ Contractie extrem de scăzută!
- ✓ Pastrare bună a formei!
- ✓ Nano-tehnologie!
- ✓ Siguranță biologică ridicată!

## Stratificarea de bază pentru Luna-Wing



1 Aplicați Primer Paste + Fotopolimerizare

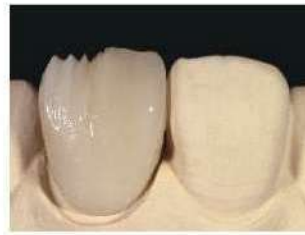

4 Aplicați Enamel HS + Fotopolimerizare



2 Aplicați Opaquet + Fotopolimerizare



5 Lustruire



3 Aplicați Dentine HS + Fotopolimerizare



6 Finalizarea



## Variație extinsă de culoare

Nuanță de bază(A0 - D4)

A0	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	B2	D3	D4
iv0																
0A2	0A1	0A2	0A3	0A3.5	0A4	0B1	0B2	0B3	0B4	0C1	0C2	0C3	0C4	0D2	0D3	0D4
iv1																
0A1	0A2	0A3	0A3.5	0A4	0B1	0B2	0B3	0B4	0C1	0C2	0C3	0C4	0D1	0D2		
0D3	0D4	0D3	0D4	0D3.5	0D4											
0A2	0A1	0A2	0A3	0A3.5	0A4	0B1	0B2	0B3	0B4	0C1	0C2	0C3	0C4	0D2	0D3	0D4
iv2																
E2	E2	E3	E4	E1	E2	E3	E3	E3	E4	E2	E3	E3	E4	E2	E3	E3

Nuanță armonizată

A2 HS	A3 HS	A3.5 HS
iv0		
0A2	0A3	0A3.5
0D2 HS	0D3 HS	0D3.5 HS
0A2 HS	0A3 HS	0A3.5 HS
E2 HS	E3 HS	

Efecte(9 culori)

iv	WE	WE	AM	OC	Coffee	Orange	L.GUM	GUM	D.GUM
----	----	----	----	----	--------	--------	-------	-----	-------

Culori pictură (21 culori)

White	Milky	Pink	SalmonPink	White Vial	Violet	Orange	Dark Orange	Red	Red Brown	Yellow
Blue	Brown	Dark Brown	A.Shift	B.Shift	C.Shift	D.Shift	Grey	Black	Clear	

**YAMAKIN CO., LTD.**  
1090-3 Otani, Kamibun, Kagami-cho,  
Konan-shi, Kochi, 781-5451 Japonia  
<http://www.yamakin-global.com>

Sediul central: 3-7 Sanadayama-cho Tennoji-ku Osaka 543-0015, Japonia Sucursala:  
Tokyo, Osaka, Sendai, Nagoya, Fukuoka, JAPONIA Fabrică și cercetare și dezvoltare: Kochi, JAPONIA  
P: +81-887-55-0281 F: +81-887-55-0053 E:  
[contact@yamakin-gold.co.jp](mailto:contact@yamakin-gold.co.jp)

CE 0123  
INTERNATIONAL20180116